

AURA

AURA-HEALTHY

HEALTHY
BASCULA-AU1532


Báscula De Baño ELECTRONICA

CON MEDICION DE MASA MUSCULAR



Manual de usuario

Instrucciones de uso

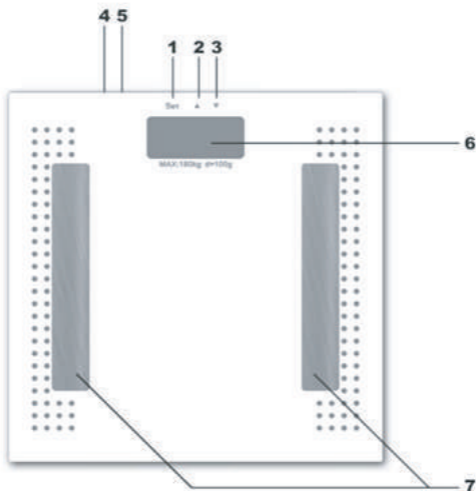

1. Botón de configuración.
2. Botón ▲
3. Botón ▼
4. Compartimento de las pilas (situado en la parte posterior de la báscula).
5. Botón de selección de la unidad (ubicado en la parte posterior del dispositivo).
6. Pantalla.
7. Área de colocación del pie.

Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar:

- Coloque la báscula sobre una superficie firme, plana y seca.
- Coloque siempre los pies secos y desnudos sobre la parte metálica de la báscula.
- No deje caer la báscula ya que podría dañarse.
- No sumerja la báscula en líquidos.
- Limpie la báscula con un paño húmedo y suave y séquela enseguida.
- Esta báscula no es adecuada para uso comercial o profesional.
- La báscula no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ella.
- Esta báscula no es adecuada para ser utilizada por personas equipadas con un dispositivo eléctrico como un marcapasos o similar.
- Nunca utilice una combinación de pilas nuevas y usadas.
- Respete siempre la polaridad de las pilas.
- No limpie la superficie de la báscula con sustancias abrasivas o paños abrasivos.

Pilas

Pilas utilizadas por la báscula: 2 X AAA incluidas.

Inserte las pilas en el compartimiento de pilas (4) situado en la parte posterior de la báscula, observando la polaridad.

Si aparece 'LO' en la pantalla, reemplace ambas pilas por otras nuevas ya que la báscula le está indicando que las pilas están bajas.

Instrucciones de uso

Para cambiar la unidad de medida:

En el modo de pesaje (indicador de peso), pulse 'UNIT' (5) situado en la parte posterior de la báscula para seleccionar la unidad de medida requerida.

Para comprobar su peso:

Para inicializar, presione la parte superior de la báscula hasta que la pantalla (6) muestre '0'. Entonces la báscula estará lista para su uso.

Para comprobar su peso, de pie en la báscula, la pantalla parpadeará.

Manténgase en la báscula hasta que la pantalla se estabilice para mostrar su peso.

La báscula se apagará automáticamente después de unos segundos.

Para almacenar datos de usuario.

- Pulsar 'Set' (1).
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la memoria deseada
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1). El símbolo "masculino" o "femenino" parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar género
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) y 'age (edad)' parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la edad
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) y 'height (altura)' parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la altura
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) para mostrar '0.0'

Para comprobar su peso y calcular la proporción de grasas, líquidos, músculos

- Pulsar 'Set' (1), la báscula se iluminará.
- Seleccione su memoria pulsando las flechas '▲' o '▼' para visualizar sus datos personales.
- Súbase a la báscula con los pies descalzos y secos. Coloque cada pie en el área de colocación del pie (7) y quédese quieto. Su peso se mostrará. La báscula comenzará a calcular los porcentajes.

Tan pronto como aparezcan las tasas (porcentaje de grasa corporal -FAT, porcentaje de fluidos corporales -WATER', porcentaje de músculo

'-MUSCLE', porcentaje de masa ósea '-BONE ' y el número de calorías que su cuerpo necesita), bájese de la báscula y tome nota de las diferentes tasas mostradas (se mostrarán tres veces).

La báscula se apagará automáticamente.

Protección de medio ambiente - Reciclaje

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

No deseche esta báscula con el desecho de su hogar.



El símbolo del "contenedor de basura tachado" que sigue a un producto indica que este producto está sujeto a reciclaje especial.

Póngase en contacto con su autoridad local para obtener detalles sobre los esquemas de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Los componentes eléctricos y electrónicos de este producto deben ser reciclados. Son sustancias peligrosas que pueden ser peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

Siga sus regulaciones locales y no arroje tales productos en su basura. Todos podemos ayudar a proteger el medio ambiente reciclando nuestros productos de fin de vida correctamente.

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Made in China

Declaración de conformidad

INNOVA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

INNOVA CELULAR S.L., con domicilio social en Madrid (28522), calle Severo Ochoa Nº 9 nave 8 Modulo B (tfn.: 91 499 06 24, fax: 916 660 271) y con C.I.F. número B-84215623.

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción:..... **BASCULA DE BAÑO ELECTRONICA CON MEDICION DE MASA MUSCULAR**

Marca:... **AURA** Modelo:... **BAS/AU1532 (SL901)**

País de fabricación:... **China**

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:1997+A1+A2

De acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Hecho en Madrid, a 13 de Marzo de 2017

Fdo.: En representación legal de la empresa

Jorge Revuelto Mozas.

INNOVA CELULAR S.L.
C.I.F. B-84215623
FUNDACION N.º 14 BIS NAVE 8
SEVERO OCHOA 9 - PAV. 8 - 28522
MADRID (MADRID)