

AURA

AURA-HEALTHY

HEALTHY
BASCULA-AU1533


Báscula de baño **electrónica**
Balança de banheiro **eletrônica**

CON MEDICIÓN DE MASA MUSCULAR / COM MEDIÇÃO DE MASSA MUSCULAR



Manual de usuario / Manual de usuário

Instrucciones de uso

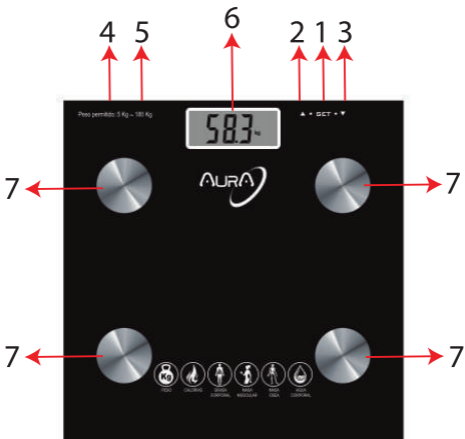

1. Botón de configuración.
2. Botón ▲
3. Botón ▼
4. Compartimento de las pilas (situado en la parte posterior de la báscula).
5. Botón de selección de la unidad (ubicado en la parte posterior del dispositivo).
6. Pantalla.
7. Área de colocación del pie.

Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar:

- Coloque la báscula sobre una superficie firme, plana y seca.
- Coloque siempre los pies secos y desnudos sobre la parte metálica de la báscula.
- No deje caer la báscula ya que podría dañarse.
- No sumerja la báscula en líquidos.
- Limpie la báscula con un paño húmedo y suave y séquela enseguida.
- Esta báscula no es adecuada para uso comercial o profesional.
- La báscula no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ella.
- Esta báscula no es adecuada para ser utilizada por personas equipadas con un dispositivo eléctrico como un marcapasos o similar.
- Nunca utilice una combinación de pilas nuevas y usadas.
- Respete siempre la polaridad de las pilas.
- No limpie la superficie de la báscula con sustancias abrasivas o paños abrasivos.

Pilas

Pilas utilizadas por la báscula: 2 X AAA incluidas.

Inserte las pilas en el compartimiento de pilas (4) situado en la parte posterior de la báscula, observando la polaridad.

Si aparece 'LO' en la pantalla, reemplace ambas pilas por otras nuevas ya que la báscula le está indicando que las pilas están bajas.

Instrucciones de uso

Para cambiar la unidad de medida:

En el modo de pesaje (indicador de peso), pulse 'UNIT' (5) situado en la parte posterior de la báscula para seleccionar la unidad de medida requerida.

Para comprobar su peso:

Para inicializar, presione la parte superior de la báscula hasta que la pantalla (6) muestre '0'. Entonces la báscula estará lista para su uso.

Para comprobar su peso, de pie en la báscula, la pantalla parpadeará.

Manténgase en la báscula hasta que la pantalla se estabilice para mostrar su peso.

La báscula se apagará automáticamente después de unos segundos.

Para almacenar datos de usuario.

- Pulsar 'Set' (1).
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la memoria deseada
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1). El símbolo "masculino" o "femenino" parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar género
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) y 'age (edad)' parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la edad
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) y 'height (altura)' parpadeará
- Pulse '▲' o '▼' para seleccionar la altura
- Confirme su elección pulsando 'Set' (1) para mostrar '0.0'

Para comprobar su peso y calcular la proporción de grasas, líquidos, músculos

- Pulsar 'Set' (1), la báscula se iluminará.
- Seleccione su memoria pulsando las flechas '▲' o '▼' para visualizar sus datos personales.
- Súbase a la báscula con los pies descalzos y secos. Coloque cada pie en el área de colocación del pie (7) y quédese quieto. Su peso se mostrará. La báscula comenzará a calcular los porcentajes.

Tan pronto como aparezcan las tasas (porcentaje de grasa corporal -FAT, porcentaje de fluidos corporales -WATER', porcentaje de músculo

'-MUSCLE', porcentaje de masa ósea '-BONE ' y el número de calorías que su cuerpo necesita), bájese de la báscula y tome nota de las diferentes tasas mostradas (se mostrarán tres veces).

La báscula se apagará automáticamente.

Protección de medio ambiente - Reciclaje

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

No deseche esta báscula con el desecho de su hogar.



El símbolo del "contenedor de basura tachado" que sigue a un producto indica que este producto está sujeto a reciclaje especial.

Póngase en contacto con su autoridad local para obtener detalles sobre los esquemas de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Los componentes eléctricos y electrónicos de este producto deben ser reciclados. Son sustancias peligrosas que pueden ser peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

Siga sus regulaciones locales y no arroje tales productos en su basura. Todos podemos ayudar a proteger el medio ambiente reciclando nuestros productos de fin de vida correctamente.

Nota: No exponga el producto a temperaturas extremas, esto podría provocar la explosión de las pilas.

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Made in China


Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que la BASCULA DE BAÑO ELECTRONICA CON MEDICIÓN DE MASA MUSCULAR (BAS/AU1533 (601)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/30/EU, 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1533.pdf

Instruções de uso

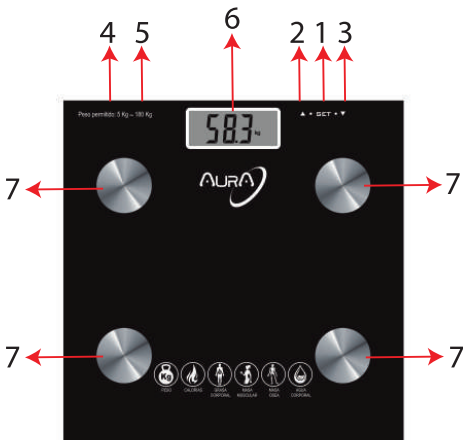

1. botão de configuração.
2. botão ▲
3. botão ▼
4. Compartimento da bateria (localizado na parte de trás da balança).
5. Botão de seleção da unidade (localizado na parte de trás dispositivo).
6. tela.
7. Área de colocação do pé.

Instruções de segurança

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar:

- Coloque a balança sobre uma superfície firme, plana e seca.
- Coloque sempre os pés secos e nus na parte metálica da balança.
- Não deixe cair a balança, pois ela pode estar danificada.
- Não mergulhe a balança em líquidos.
- Limpe a balança com um pano úmido e seque-a imediatamente.
- Esta escala não é adequada para uso comercial ou profissional.
- A balança não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com ele.
- Esta balança não é adequada para uso por pessoas equipadas com um dispositivo elétrico, como um marca-passo ou similar.
- Nunca use uma combinação de baterias novas e usadas.
- Respeite sempre a polaridade das baterias.
- Não limpe a superfície da balança com substâncias abrasivas ou panos abrasivos.

Baterias

Baterias usadas pela balança: 2 X AAA incluídas.

Insira as pilhas no compartimento da bateria (4) localizado na parte de trás da balança, observando a polaridade.

Se 'LO' aparecer na tela, substitua as duas pilhas por novas, pois a escala indica que as pilhas estão fracas.

Instruções de uso

Para alterar a unidade de medida:

No modo de pesagem (indicador de peso), pressione 'UNIT' (5) localizado na parte traseira da balança para selecionar a unidade de medida necessária.

Para verificar seu peso:

Para inicializar, pressione a parte superior da balança até o visor (6) mostrar '0'. Então a balança estará pronta para uso.

Para verificar seu peso, em pé na balança, a tela piscará.

Permaneça na escala até que a tela se estabilize para mostrar seu peso. A balança será desligada automaticamente após alguns segundos.

Para armazenar dados do usuário.

- Pressione 'Set' (1).
- Pressione '▲' ou '▼' para selecionar a memória desejada
- Confirme a sua escolha pressionando 'Set' (1). O símbolo "macho" ou "fêmea" piscará
- Pressione '▲' ou '▼' para selecionar o gênero
- Confirme a sua escolha pressionando "Set" (1) e "age (age)" irá piscar
- Pressione '▲' ou '▼' para selecionar a idade
- Confirme a sua escolha, premindo "Definir" (1) e "altura (altura)" irá piscar
- Pressione '▲' ou '▼' para selecionar a altura
- Confirme a sua escolha pressionando 'Set' (1) para mostrar '0.0'

Para verificar seu peso e calcular a proporção de gorduras, fluidos, músculos

- Pressione 'Set' (1), a escala acenderá.
 - Selecione sua memória pressionando as setas '▲' ou '▼' para exibir seus dados pessoais.
 - Suba na balança com os pés descalços e seque. Coloque cada pé na área de colocação do pé (7) e fique parado. Seu peso será exibido. A balança começará a calcular as porcentagens.
- Assim que as taxas aparecem (porcentagem de gordura corporal - FAT, porcentagem de fluidos corporais - 'Água', porcentagem de músculo

-'MUSCLE', porcentagem de massa óssea -' BONE 'e o número de calorias que seu corpo precisa), saia da escala e anote as diferentes taxas mostradas (elas serão mostradas três vezes).

A balança será desligada automaticamente.

Proteção Ambiental - Reciclagem

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descarte essa balança com o lixo da sua casa.



O símbolo "lixeira com rodas cruzada" que se segue um produto indica que este produto está sujeito a reciclagem especial.

Contacte a sua autoridade local para obter detalhes sobre esquemas de reciclagem de produtos elétrica e eletrônica

Os componentes elétricos e eletrônicos deste produto devem ser reciclado São substâncias perigosas que podem ser perigosas para o saúde humana e meio ambiente.

Siga os regulamentos locais e não jogue esses produtos no lixo. Todos nós podemos ajudar a proteger o meio ambiente reciclando nossas Produtos em fim de vida corretamente.

Nota: Não exponha o produto a temperaturas extremas, isso pode faça as baterias explodirem.

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

91 499 06 24**INNOVA CELULAR SL**
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Made in China

Declaração de conformidade

Através desta INNOVA CELLULAR declara que o BASCULADO DE BANHO ELECTRÓNICO COM MEDIÇÃO DE MASSA MUSCULAR (BAS / AU1533 (601)) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigidas das Directivas CE 2014/30/UE, 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a legislação espanhola pelo Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessá-la através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaración / declaración_bas-au1533.pdf